Numerys GF

Blocs et disque en fibres de verre



Respect des contraintes de mastication

Inlay-core adapté à la forme anatomique du canal radiculaire

Gain de temps


Enhance your daily practice*

itena CLINICAL

Inlay-core en fibre de verre

FORMAT DISQUE POUR LES LABORATOIRES

1 disque = jusqu'à 45 inlay-cores

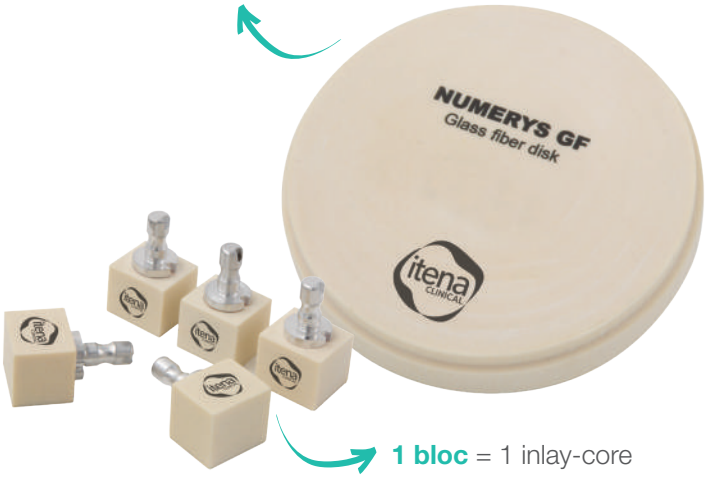

1 bloc = 1 inlay-core

Points forts

Respect des contraintes de mastication

> Résistance à la flexion et module d'élasticité proche de celui de la dentine

Inlay-core adapté à la forme anatomique du canal radiculaire

Gain de temps

> Pas d'opacification nécessaire lors de la fabrication de prothèses

Indication

Préparation d'inlay-cores anatomiques en composite fibré via les systèmes de CFAO dentaires.

Données Techniques**

> Résistance à la flexion	990 MPa
> Module d'élasticité	23,8 Gpa

Numerys GF - 5 blocs	
H18mm, L 15mm, l 16mm	NYSGF-BCS

Numerys GF - 1 disque	
Ø98.5mm - Hauteur 20mm	NYSGF-DSK

Cas clinique

Exemple de cas clinique du Dr Gérard Duminil



1 *Radio de la dent 21 jours après dépose de la couronne défaillante.*



2 La pièce en sortie d'usinage.



3 Essayage sur le modèle.



4 *Contrôle radiologique de l'adaptation.*





5 Mordançage du canal à l'acide phosphorique.

6 Silanisation de la pièce avant mise en place de l'adhésif.




7 Dans le canal, appliquer :
- L'adhésif puis sécher.
- L'activateur puis sécher.
- La colle composite **Total C-Ram.**



8 Immédiatement après l'insertion, effectuer une première photopolymérisation rapide pour enlever les excès de colle, ensuite, effectuer une seconde polymérisation plus longue pour assurer la bonne prise du matériau.



9 Aspect de l'inlay-core avant l'empreinte pour la couronne.

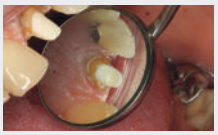

10 Vue linguale de l'adaptation.



11 Aspect final après mise en place de la dent d'usage.

Dispositif Médical Classe IIa, CE 0425 - Fabricant : Itena Clinical. Réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR.
Lire attentivement la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

itena CLINICAL
Enhance your daily practice

itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FPNUMERYSGF.FR I IND.A 01/24

Rejoignez-nous !

*Améliorer votre pratique quotidienne. **Rapport interne, Itena Clinical , "Numerys GF".